

Hvis du har problemer med iltudstyret


Inden du kontakter VitalAire, bør du undersøge følgende fejlmuligheder:



Kontrollér, om ledningen sidder i en tændt stikkontakt, og prøv evt. med en lampe om der er strøm. Er der ikke strøm, vil iltmaskinen alarmere med en lang tone og ingen lys tændt i panelet. Er der strøm-svigt i dit område, så gå over til din backup-ilt, og kontakt VitalAire, hvis strømmen ikke er etableret inden for 30 min. og vi vil sørge for ilt til dig.



Er iltslangen blokeret? Hvis ilten bliver afklemt vil gul lampe lyse, sammen med en pulserende alarm. Fjern blokeringen og alarmen stopper. Føler du ikke du får den ilt du skal have, kan det skyldes utætheder på slange og samlinger. Der kan testes på følgende måde, tag iltslange med hen til ilt-maskinen, sikre dig at den er justeret til din dosering. Ved at afklemme ilten på ilt brillen skal kuglen falde ned efter kort tid, hvis systemet er tæt.

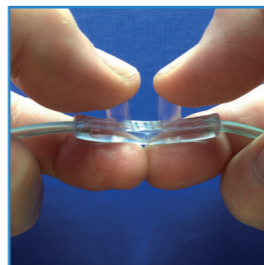

Telefon 44 92 35 44

Rengøring

Advarsel: Det er vigtigt, at el-ledningen trækkes ud af stikkontakten før rengøring.

Mindst en gang om ugen

- Filteret på bagsiden, hvor luft kommer ind støvsuges.



- Brug en fugtig klud til at tørre Intensity af udvendig.

Specifikationer

Dimensioner:

H x B x D: (69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

Vægt: 26,3 kg.

Lydniveau: <52 dBA i gennemsnit

Iltprocent : 1–10 l/min: 90 +/- 3%

Strømforbrug:

<590 watt i gennemsnit

Miljømæssige grænseforhold:

Apparatet må kun anvendes i lodret position.

Omgivelsestemperaturer på mellem 13 °C og 32 °C.

Apparatet må ikke anvendes i fugtige rum.



VitalAire
Leverandør af livskvalitet

Brugervejledning

Ilt-koncentrator "Intensity 10"

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

VitalAire under Air Liquide Gruppen, er med sine 6.000 ansatte over hele verden, repræsenteret indenfor Homecare, medicinske gasser, medicinsk hygiejne samt indenfor farmaceutiske og kosmetiske hjælpstoffer.

Air Liquide
HEALTHCARE

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret. Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

Hvorfor ordineres supplerende ilt

Mange lider af hjerte-, lunge og andre luftvejssygdomme, og mange af dem kan have gavn af supplerende ilt-behandling, da kroppen kræver en stabil forsyning af ilt for at fungere ordentligt. Din læge har ordineret supplerende ilt til dig, fordi du ikke får nok ilt fra luften alene. Supplerende ilt er ikke afhængighedsskabende.

Hvordan ilt-koncentratoren fungerer

Den omgivende luft, vi indånder indeholder ca. 21% ilt, 78% nitrogen og 1% andre gasser. Ilt-koncentratoren kan ikke "skabe" sin egen ilt. Den trækker rum luft ind i maskinen ved hjælp af en kompressor. Denne luft passerer gennem en form for filtrering, som fjerner støv og andre små partikler. Inden i koncentratoren passerer rumluften gennem et adsorberende materiale zeolitten også kaldet molekylsi. Molekylsigten adsorberer nitrogen i rumluften, nitrogen adskillels fra ilten. Ilten forlader koncentratoren og leveres til patienten i en høj koncentration af ilt > 90% renhed.

Advarsel

1. Placer ilt-koncentratoren således, at dens alarmer kan høres.
2. Placer ikke ilt-koncentratoren i et skab eller i små, indelukkede rum.
3. Placer ilt-slangen, så der ikke opstår knæk så ilten blokeres.
4. Placer ilt-koncentratoren i nærheden af en stikkontakt og mindst 16 cm fra vægge, gardiner og andre objekter, der kan forhindre korrekt lufttilstrømning. Ilt-koncentratoren skal placeres således, at den ikke kommer i kontakt med forurenende emner eller dampe, og enheden skal placeres på et velventileret sted, således at luftindsugningen og -udblæsningen ikke blokeres. Tildæk aldrig koncentratoren med et tæppe, håndklæde, viskestykke m.v., da der i modsat fald kan opstå overophedning.
5. Tilslut ikke ilt-koncentratoren til en forlængerledning. Ingen øvrige apparater bør være sluttet til stikkontakten.

Sikkerhedsforskrifter



- Tobaksrygning samt brug af åben ild er forbudt i nærheden af ilt-udstyr.
- Følg altid lægens ordning af ilt. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!
- Anvend aldrig olier, fedt og lignende på ilt-udstyret, ilt kan gå i kemisk forbindelse med fedtstofferne.
- Forsøg aldrig selv at reparere ilt-udstyret.

- Hold altid en sikkerheds afstand til åben ild på mindst 2 meter
- Før anvendelse af ild skal du stoppe ilt-behandlingen i mindst 15 min. for at ilten som har ophobet sig i dine klæder, ikke udgør nogen forhøjet brand risiko



Kend din ilt-koncentrator



Indstilling af ilt-dosis

Udtag til ilt-slange

Timetæller

Termosikring

Tænd og slukknop

Hjul




"Intensity 10" tages i brug på følgende måde:

Du vil tænde for apparatet



1 Tænd iltapparatet
Tilslut koncentratoren til en stikkontakt. Tryk på den sorte knap [1].

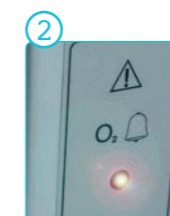

2 Alarmfunktion
Når koncentratoren tændes, udsender apparatet en kort alarmlyd. Lampen lyser, indtil iltprocenten er optimal.



4 Efter brug
Koncentratoren slukkes igen ved et tryk på den sorte knap [0].

Indstil dosering
Drej knappen, og indstil midt af kuglen til den ilt-dosis, din læge har ordineret.

